

# Sterican® Safety

## Aiguilles hypodermiques sécurisées



Sortez l'aiguille Sterican® Safety de son emballage après avoir vérifié son intégrité



Tenez le dispositif au niveau de la base du clapet de sécurité transparent et connectez l'aiguille sécurisée à n'importe quelle seringue présentant une connectique Luer-Lock ou Luer-Slip en effectuant un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre




Tenez la seringue à une main et avec la deuxième, déployez le clapet vers l'arrière en direction de la seringue



Retirez prudemment le capuchon protecteur de l'aiguille




Effectuez la manipulation selon le protocole de l'établissement

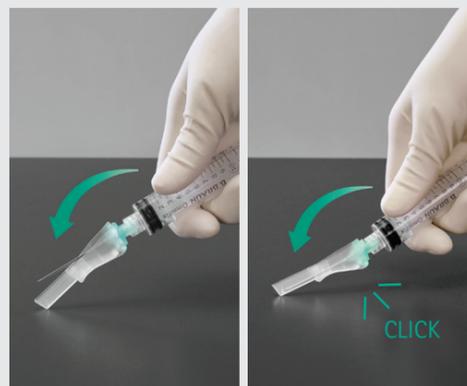

Deux méthodes sont possibles pour activer le mécanisme de sécurité:

1. Appuyez sur le clapet de protection contre une surface dure et plate jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore

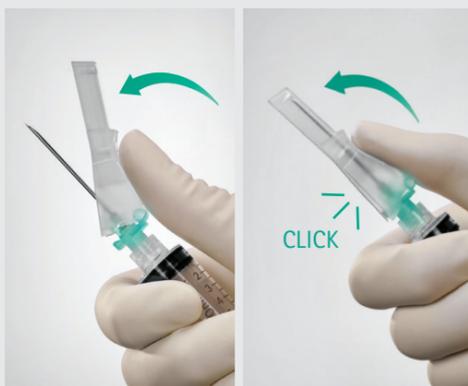

2 Appuyez avec votre pouce sur le clapet de sécurité de façon à ce qu'il vienne se positionner sur l'aiguille. La sécurité est en place lorsque vous entendez un clic sonore.



Confirmez visuellement la sécurisation de l'aiguille avant de l'éliminer



Après sécurisation de l'aiguille, éliminez la immédiatement dans un collecteur prévu pour cet usage

Sécurisez le dispositif à distance des autres.

Sterican® Safety	Diamètre externe		Longueur	Conditionnement	Référence
	Gauge	mm			
	30	0.30	13	100	4670002S-01
	27	0.40	13	100	4670005S-01
	26	0.45	13	100	4670008S-01
	25	0.50	16	100	4670012S-01
	25	0.50	25	100	4670016S-01
	25	0.50	40	100	4670020S-01
	24	0.55	25	100	4670022S-01
	23	0.60	25	100	4670025S-01
	23	0.60	30	100	4670027S-01
	23	0.60	40	100	4670028S-01
	22	0.70	25	100	4670030S-01
	22	0.70	30	100	4670032S-01
	22	0.70	40	100	4670035S-01
	21	0.80	25	100	4670040S-01
	21	0.80	30	100	4670042S-01
	21	0.80	40	100	4670045S-01
	20	0.90	25	100	4670047S-01
	20	0.90	40	100	4670050S-01
	19	1.10	40	100	4670052S-01
	18	1.20	25	100	4670053S-01
	18	1.20	40	100	4670055S-01



## Sterican® Safety

### Poster de manipulation

### Aiguilles hypodermiques sécurisées

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr  
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

301595P\_20180810\_20230810