

# Ureofix® 112 Plus

## Poche de recueil urinaire stérile

### Ureofix® 112 Plus



Ureofix® 112 Plus	REFERENCE	LONGUEUR DE TUBULURE	VOLUME DE LA POCHE	UNITES PAR BOITE
	28431S	110 cm	2L	25

- Ureofix® 112 Plus est une poche de recueil stérile pour le drainage urinaire
- Dispositif Médical de Classe I stérile  
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette
- Certificat CE délivré par TÜV SÜD (CE 0123)
- Produit non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables au titre de l'article L165-1 du code de la sécurité sociale)
- Fabriqué par : B.Braun Melsungen AG, Carl Braun Strass 1, D-34212 Melsungen, Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun Medical.  
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun Medical est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun Medical.

Edition : 01/2014

URO\_20140107

Distribué par :

B. Braun Medical S.A.S. | 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt - France  
Tél. 01.41.10.53.00 | www.bbraun.fr | info.conseil@bbraun.com  
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Document réservé aux professionnels de Santé.



Pour le recueil urinaire en système clos

Avec site de prélèvement sans aiguille en silicone

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Ureofix<sup>®</sup> 112 Plus

En réponse aux recommandations internationales\*

## POUR LE RECUEIL URINAIRE EN SYSTEME CLOS un triple concept de sécurité

- Chambre de pasteur transparente avec valve anti-reflux intégrée
- Robinet de vidange en croix rabattable sur la poche
- 1 paire de gants stériles, non poudrés, en PVC



**SECURITE  
DU PERSONNEL  
SOIGNANT**


### SITE DE PRÉLÈVEMENT EN SILICONE SANS AIGUILLE

Site de prélèvement des urines sans aiguille, sans latex sur un connecteur de type universel. Evite le risque de piqûre au moment du prélèvement d'urine.



### GANTS STÉRILES, SANS LATEX, NON POWDRÉS

Gants à usage unique pour réduire le risque de contamination croisée. Permet la connexion de façon aseptique de la poche.

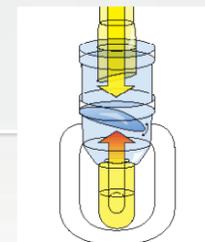

### CHAMBRE COMPTE-GOUTTE ANTI-REFLUX

- Conçue pour réduire le risque de migration rétrograde des bactéries vers le tube de drainage et prévenir les contaminations croisées
- Air-Vent pour un équilibre des pressions au moment du drainage
- Double sécurité :  
Valve anti-reflux dans la chambre de Pasteur et dans la poche de recueil



### BOUCHON DE VIDANGE EN CROIX



### CAPUCHON SUR LA POCHE

Permet de rabattre le bouchon de vidange pour réduire le risque de contamination croisée



- poche de recueil de 2 L avec graduations
- 2 systèmes d'accroche :
  - cordelettes lorsque le patient doit se déplacer
  - double crochet de type universel pour fixation au lit
- bouchon de vidange en croix conçu pour éviter les éclaboussures d'urine au moment de la vidange de la poche
- longueur du tube : 110 cm
- diamètre interne : 6,8 mm
- clamp
- clip de fixation au drap du lit

\* Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care. EAUN 2012.