


Conteneurs Aesculap® - Les différentes générations


GÉNÉRATION 1

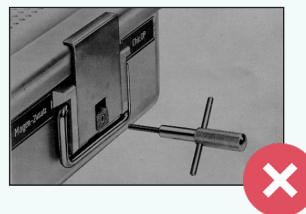

- Petites poignées autobloquantes 90°
- Plaquettes d'identification de chaque côté
- Plaques de fermeture sur la cuve
- Filtre carré, sans joint sur le porte filtre

Commercialisation de **1972 à 1984**


GÉNÉRATION 2

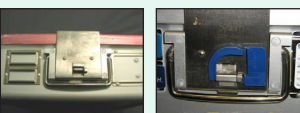

- Petites poignées autobloquantes 90°
- **2 plaquettes d'identification à gauche et étiquette de passage à droite**
- Plaques de fermeture sur la cuve
- Filtre carré, sans joint sur le porte filtre
- **Système de verrouillage avec un plomb**

Commercialisation de **1984 à 1987**

GÉNÉRATION 3

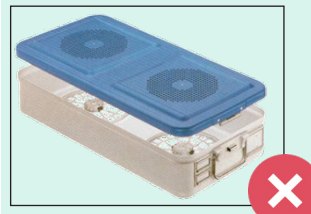

- Petites poignées autobloquantes 90°
- 2 plaquettes d'identification à gauche et étiquette de passage à droite
- **Plaques de fermeture sur le couvercle avec ressort intégré**
- **Filtre rond avec deux joints sur le porte filtre**
- Système de verrouillage avec un plomb

Commercialisation de **1987 à 1994**

GÉNÉRATION 4



- **Larges poignées autobloquantes 90°**
- **2 plaquettes d'identification à gauche et étiquette plomb à droite**
- Plaques de fermeture sur le couvercle avec ressort intégré
- Filtre rond avec deux joints sur le porte filtre
- Système de verrouillage avec un plomb
- **Système de sur-couvercle**

Commercialisation de **1994 à aujourd'hui**



GÉNÉRATION 5



- Larges poignées autobloquantes 90°
- 2 plaquettes d'identification à gauche et étiquette plomb à droite
- Plaques de fermeture sur le couvercle avec ressort intégré
- Filtre rond avec un joint sur le porte filtre
- Système de verrouillage avec un plomb
- **Couvercle en aluminium intégrant une cartouche filtrante en PTFE* validée pour 5000 cycles de stérilisation**

Commercialisation de **2002 à aujourd'hui**

GÉNÉRATION 6

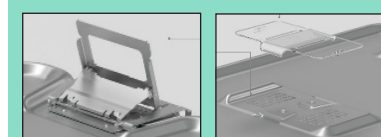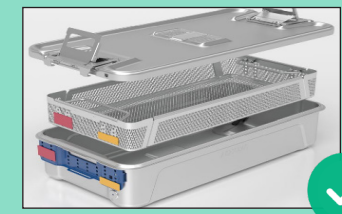

- **Poignées ergonomiques intégrées à la cuve du conteneur**
- **Système d'identification avec plaque frontale amovible**
- **Système de fermeture plus large, et positionné sur le couvercle**
- **Filtre unique**
- Système de verrouillage avec un plomb
- **Système de sur-couvercle transparent qui facilite le contrôle du filtre à tout moment**
- **Ne nécessite pas de maintenance préventive**

Commercialisation depuis **2021**

X Pièces détachées **non disponibles** depuis Janvier 2006 sur les générations 1 et 2 et depuis décembre 2016 pour la génération 3

✓ Pièces détachées **disponibles** pour les génération 4, 5 et 6

* Polytetrafluoroéthylène

Conteneurs de stérilisation. Dispositifs médicaux de classe I. Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage. Produits non pris en charge au titre de la LPPR.

Fabriqué par : Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne
 B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92100 Saint Cloud - France. Document et photo non contractuels. Edition 03/2022 CTN_20220103
 Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 53 45 00 | www.bbraun.fr B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856