



**LA TECHNOLOGIE ACTREEN®**  
UN REGARD NEUF SUR LE **PACKAGING**




# ACTREEN® : UN PACKAGING UNIQUE

## Film multi-couches en Polyéthylène (PE)<sup>(1)</sup>

### STRUCTURE DU FILM :

- Notre film est en polyéthylène. Il fait office d'emballage primaire tout en assurant la stérilité de nos sondes Actreen®.
- Le film répond aux exigences du marquage CE, notamment celles de la norme EN ISO 11 607.<sup>(2)</sup>
- Le film possède les propriétés suivantes :

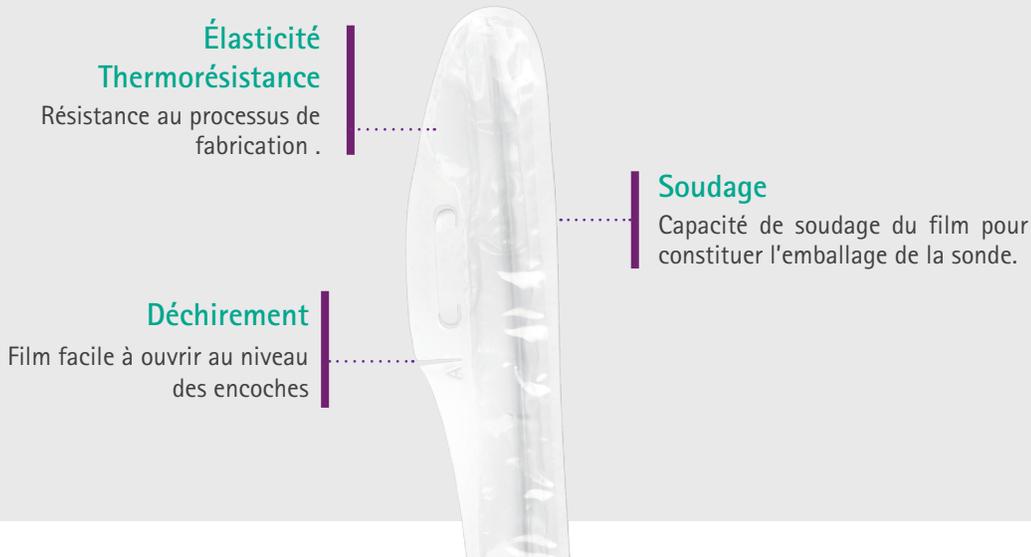

## TESTS SUR LE FILM :

- De nombreux tests sont réalisés sur le packaging des sondes Actreen® par nos équipes Qualité situées sur le site de production de Nogent-le-Rotrou.
- Parmi ces tests<sup>(3)</sup> :



Suspension par la sonde d'un set de sondage rempli afin de vérifier la tenue des scellages.



Application d'un poids sur une poche remplie pour vérifier la bonne tenue des soudures et ainsi valider la conformité de l'étanchéité du produit.

<sup>(1)</sup> Sauf Actreen® Hi-Lite Set (PE/PP)

<sup>(2)</sup> Norme EN ISO 11607 : Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

## ACCOMPAGNE LA VIE DU PRODUIT :

---

- Les multiples couches du film en polyéthylène (PE) confèrent une **forte résistance** afin de protéger le produit de l'environnement extérieur durant toute sa durée de vie. Elles permettent un maintien de la stérilité tout en assurant une ouverture aisée pour un accès facile aux produits grâce aux pré-découpes.<sup>(3)</sup>
- Notre film en polyéthylène **peut être recyclé**. S'il est incinéré, le PE se transforme en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone.  
*(Jetez le produit selon les réglementations locales en vigueur).*

## ACCOMPAGNE LA VIE DU PATIENT :

---

- Un **matériau léger** :
  - Actreen® Hi-Lite a la meilleure performance environnementale en générant moins de déchets par rapport aux sondes concurrentes.<sup>(4)</sup>
  - Actreen® Mini <sup>Set</sup> est 4 fois plus léger que le principal set concurrent.<sup>(5)</sup>
- Le film en polyéthylène et ses propriétés de déchirement permettent au patient d'**ouvrir facilement le produit** grâce aux pré-découpes et à l'onglet de préhension.



- Le film sert de **packaging primaire** mais aussi de **système No Touch** grâce à sa souplesse : le patient peut remonter l'emballage au fur et à mesure de l'insertion de la sonde dans l'urètre.

# Actreen® c'est :

## LA SÉCURITÉ

---

- Matériau (POBE) sûr avec un **lubrifiant non-spermicide**.<sup>(6)</sup>
- **Maintien du niveau d'hydratation de la sonde** depuis l'ouverture jusqu'à 60 min.<sup>(7)</sup>
- **Technique « No Touch »** sur toutes les sondes pour éviter la contamination de la sonde.

## UN PRODUIT SIMPLE

---

- **Prêt-à-l'emploi** grâce à son **lubrifiant hydrophile**, sans ajout d'eau, sans préparation.

## LA FACILITÉ D'UTILISATION

---

- Produits **faciles à ouvrir** grâce au film souple.
- **Légers, faciles à manipuler et à transporter**.
- **Discrets** dans la poche ou dans un sac à main.

<sup>(3)</sup> Rapports de test et d'analyse B. Braun Hi-Lite Cath : 7.5.AC.082.3; Hi-Lite Set : 7.5.AB.054.2; Mini Cath : 7.5.AC.084.2; Mini Set : 7.5.AB.056.1. Tests réalisés en conditions de vieillissement accéléré.

<sup>(4)</sup> Environmental comparison between Actreen Hi Lite range and competitor products (Hollister : VaPro Pocket™, VaPro Pocket Plus™ ; Coloplast : Speedicath® Compact, Speedicath® Compact Set ; Wellspect : LoFric® Origo, LoFric® Hydro Kit), pages 6-7, F. Bouton, EVEA, 16 Mai 2017

<sup>(5)</sup> Rapport interne 7.3.AB.026.1 (28/01/2014). Actreen Mini Set/Speedicath Compact Set Femme. Pages 3 (poids pour 5 produits soit la quantité nécessaire pour une journée) et 11.

<sup>(6)</sup> J. Auger et al. Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, motility and kinematics in vitro. Minerva Urol Nefrol 2007;59:115-24

<sup>(7)</sup> Rapport de test et d'analyse B.Braun 7.5AC..059.1 Perte de masse sondes urinaires 19/11/12. Test réalisé sur les sondes Actreen® Lite Cath.

# (RE)DÉCOUVREZ LA GAMME ACTREEN®

Nos sondes et sets pour sondage intermittent Actreen® Mini et Actreen® Hi-Lite sont issus de la Recherche et du Développement de B. Braun Medical dans le Centre d'Excellence de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).



## GAMME ACTREEN® MINI

La gamme Actreen® Mini a été spécialement conçue pour les femmes, pour les accompagner tout au long de leur journée et en fonction de leurs troubles de la continence.

### ACTREEN® MINI CATH

Nelaton 13 cm



CH	GTIN	Références
● 08	4046955312689	228008R
● 10	4046963489137	228010R
○ 12	4046963489311	228012R
● 14	4046963489472	228014R
● 16	4046955313211	228016R

### ACTREEN® MINI SET

Nelaton 9 cm



CH	GTIN	Références
● 10	4046964287664	239010R
○ 12	4046964287695	239012R
● 14	4046964287725	239014R



## GAMME ACTREEN® HI-LITE

La gamme Actreen® Hi-Lite est disponible en sonde seule et en set de sondage. Deux embouts de sondes sont disponibles : Nelaton et Tiemann. L'embout de sonde Tiemann a été spécialement conçu pour faciliter le passage de la sonde à travers l'urètre.

### ACTREEN® HI-LITE CATH

#### Nelaton 41 cm

CH	GTIN	Références
● 08	4046964138089	238208R
● 10	4046964138201	238210R
○ 12	4046964138324	238212R
● 14	4046964138447	238214R
● 16	4046964138560	238216R
● 18	4046964138683	238218R

#### Nelaton 20 cm

CH	GTIN	Références
● 06	4046964138805	238306R
● 08	4046964138928	238308R
● 10	4046964139048	238310R
○ 12	4046964139161	238312R
● 14	4046964139284	238314R
● 16	4046964139406	238316R

#### Tiemann 41 cm

CH	GTIN	Références
● 08	4046964137365	238108R
● 10	4046964137488	238110R
○ 12	4046964137600	238112R
● 14	4046964137723	238114R
● 16	4046964137846	238116R
● 18	4046964137969	238118R



### ACTREEN® HI-LITE SET

#### Nelaton 37 cm

CH	GTIN	Références
● 10	4046964802973	242210R
○ 12	4046964803093	242212R
● 14	4046964803215	242214R
● 16	4046964803338	242216R
● 18	4046964803451	242218R

#### Tiemann 37 cm

CH	GTIN	Références
● 10	4046964802256	242110R
○ 12	4046964802379	242112R
● 14	4046964802492	242114R
● 16	4046964802614	242116R
● 18	4046964802737	242118R

PACKAGING

Actreen® Hi-Lite<sup>Cath</sup>, Actreen® Hi-Lite<sup>Set</sup>, Actreen® Mini<sup>Cath</sup> et Actreen® Mini<sup>Set</sup> sont des sondes pour sondage intermittent, dispositifs médicaux de classe I stérile. Produits pris en charge au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Pour les conditions de prise en charge au titre de la LPPR, se reporter au site internet : [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE0123).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B.Braun. Toute présentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. B. Braun décline toute responsabilité quant à l'utilisation du présent support, et plus particulièrement en cas de dommage subi par l'utilisateur, résultant de l'utilisation du présent support ou de l'impossibilité de l'utiliser. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

**Fabriqué par :**

B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

ZG00363\_20190814\_20240607