

Novosyn® Quick

Tresse synthétique résorbable à court terme

Description

Novosyn® Quick est une tresse synthétique à résorption rapide, à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en incolore.

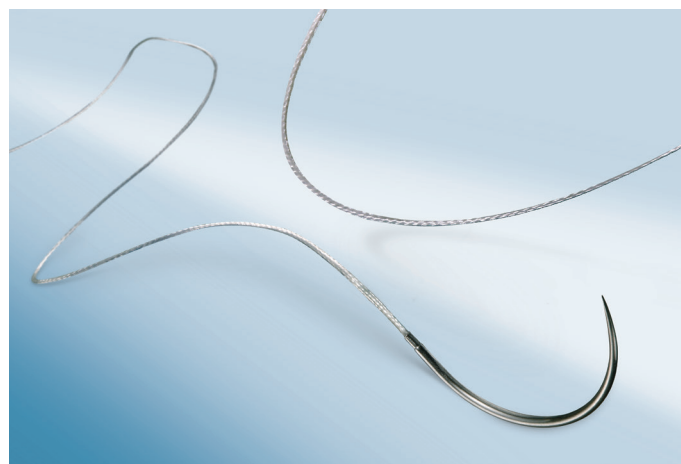
Novosyn® Quick est indiqué pour le rapprochement des tissus mous, lorsqu'un support de la plaie à court terme est requis et que la résorption rapide de la suture apporte un effet bénéfique.


Propriétés

- Conserve 50% de sa résistance initiale après 5 jours
- Résorption totale en environ 42 jours

Indications

- Chirurgie gynécologique / obstétrique
- Chirurgie pédiatrique
- Fermeture cutanée et de muqueuse buccale












Caractéristiques produit	
Structure	Tresse 
Couleur	Incolore
Composition chimique	glycolide (90 %) et L-lactide (10 %)
Enduction	glycolide (30 %), L-lactide (70%) et stéarate de calcium
Origine	Synthétique
Calibres	USP 6/0 (Déc. 0,7) à USP 2 (Déc. 5)
Résistance à la traction	50% après 5 jours d'implantation 0% après 14 jours d'implantation
Résorption	Par hydrolyse, totale en 42 jours
Stérilisation	Irradiation Gamme

Novosyn® Quick

Combinaison fil-aiguille



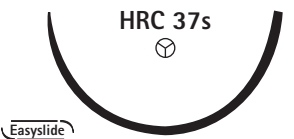
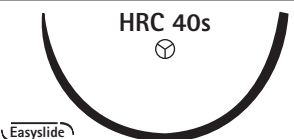
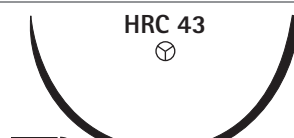
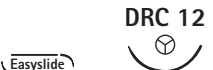




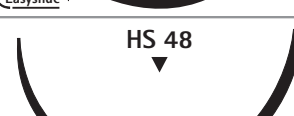
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
Aiguille ronde 1/2 cercle										
 HR 13	70 incolore	*C3046001	*C3046002							
 HR 17	70 incolore	C3046011	C3046012	C3046013	C3046014					
 HR 22	70 incolore			C3046029	C3046030	C3046031				
 HR 26	70 incolore					C3046042	*C3046043			
 HR 37	70 incolore					C3046005	*C3046006			
 HR 37s	90 140					C3046595 C3046591	C3046596	C3046597		
 HR 40s	90 incolore						C3046556	C3046557	*C3046558	
Aiguille ronde 5/8 cercle										
 FR 36	90 incolore						*C3046078	C3046079		
 FR 40	90 incolore						*C3046019			

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Novosyn® Quick

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle									
 HRC 37s	90 incolore				*C3046360	C3046651	C3046652	*C3046653	
 HRC 40s	90 incolore						*C3046003		
 HRC 43	90 incolore						C3046662	C3046365	
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle									
 DRC 12	70 incolore		*C3046311						
 DRC 18	70 incolore			*C3046320	*C3046321				
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 18	45 70 incolore			*C3046226	*C3046227				
 HS 37s	90 incolore					C3046240	C3046241	*C3046242	
 HS 40s	90 incolore						*C3046586	*C3046587	
 HS 48	90						*C3046525		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Novosyn® Quick

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
DS 12	70 incolore	*C3046201	C3046202	C3046203					
DS 16	70 incolore		*C3046212	C3046213	C3046214				
DS 19	45 70 90 incolore		C3046219	C3046220 C3046420	C3046221 C3046421 *C3046224	*C3046422			
DS 24	70 incolore			C3046234	C3046235	C3046236			
DS 30	90				*C3046246	C3046247	C3046248		

Aiguille triangulaire droite									
GS 45	70 incolore				*C3046515				
GS 51	70 incolore			*C3046271	C3046272	*C3046273	*C3046274		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Novosyn[®] Quick

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Aiguille triangulaire avec pointe de précision(tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
DSMP 11 	45 70 incolore	C3046607 *C3046603							
DSMP 13 	45 incolore		C3046619	C3046620					
DSMP 16 	45 70 incolore		*C3046611	C3046685	C3046686				
DSMP 19 	45 70 incolore			C3046629 C3046529	*C3046630 C3046530	*C3046631 *C3046531			
DSMP 24 	70 incolore				C3046657	C3046658			

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613